

# Mepiform®


## Pansement pour cicatrices siliconé, auto-adhérent

### Pellicule sur non-tissé

- Mince et discret
- Souple
- Stratifié de polyuréthane non absorbant sur viscose non-tissée
- Perméable à la vapeur d'eau
- Imperméable

### Enduit de silicone molle Safetac®

- Adhère délicatement à la peau et aux tissus fragiles
- S'enlève sans trauma ni douleur
- Ne requiert aucune fixation

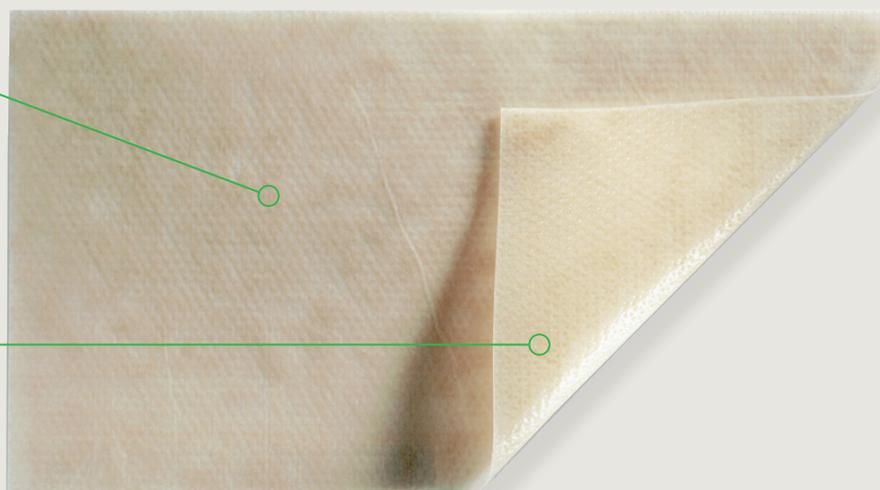

**Safetac®**  
TECHNOLOGIE

- Mince, souple et discret
- Aucune fixation requise
- Épouse bien les formes
- Ne nuit pas aux activités quotidiennes

## Choix éprouvé pour un meilleur résultat

Safetac\*, lancé par Mölnlycke, dépasse les attentes. Reconnus pour aider à optimiser la guérison des plaies, voire même prévenir les blessures, les pansements avec Safetac représentent le choix sûr pour les patients et la norme supérieure en soins des plaies.

En fait, de nombreuses données confirment les avantages cliniques et économiques des pansements avec Safetac, y compris Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® et Mepitac®. À ce jour, ces pansements ont aidé des millions de patients partout dans le monde<sup>1-3</sup>.


\*Une technologie propriétaire unique exclusif à Mölnlycke Health Care

**Safetac®**  
TECHNOLOGIE


**Mepiform®**

  
**Mölnlycke®**


## Comment utiliser Mepiform®

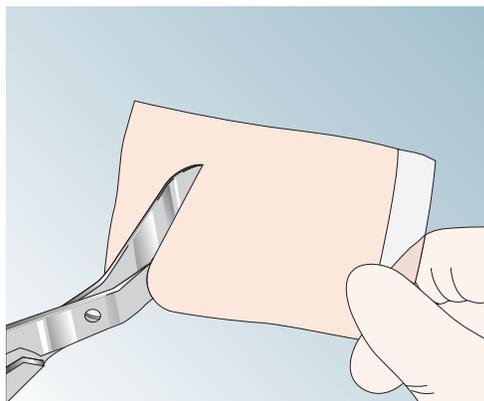

La plaie doit être complètement guérie et les sutures enlevées. Découper le pansement aux dimensions requises, en ménageant une marge d'au moins 1 cm autour de la région traitée.

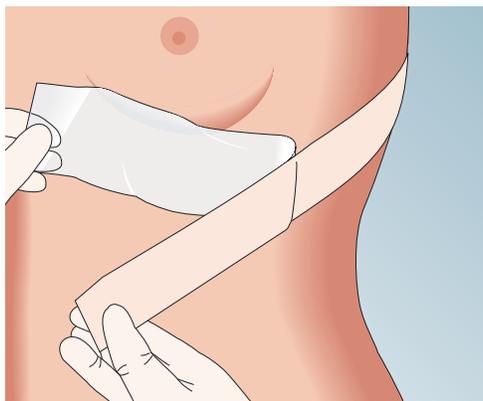

Retirer la pellicule protectrice et poser le pansement. Mepiform® doit être porté 24 heures par jours. Retirer le pansement chaque jour pour observer et nettoyer la région traitée. Remettre le pansement.

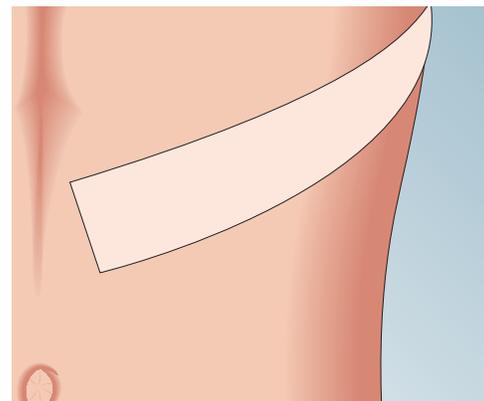

En règle générale, on peut porter le même pansement pendant 3 à 7 jours ou plus. Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut utiliser Mepiform® pendant 2 à 4 mois ou plus, selon l'aspect et l'âge de la cicatrice. Plus la cicatrice est récente, plus le traitement est efficace.

## Mode d'action de Mepiform®

La silicone topique exerce un effet bénéfique sur les cicatrices hypertrophiées et les chéloïdes.<sup>1,2</sup> Le traitement d'une ancienne cicatrice dure de 3 à 12 mois ou plus, selon l'état du tissu cicatriciel. Le traitement prophylactique dure de 2 à 6 mois selon l'état du tissu cicatriciel.

## Avantages de Mepiform®

- Auto-adhérent, ne nécessite aucune fixation
- Mince, souple et discret
- Ne nuit pas aux activités quotidiennes
- Le même pansement se porte pendant 3 à 7 jours ou plus, selon l'état de la peau et les circonstances.

## Sélection Mepiform® (emballage stérile)

No d'article	Format cm (pansement)	Pièces/boîte	Pièces/caisse
293100	4 x 30	5	50
293200	5 x 7,5	5	25
293400	10 x 18	5	35

\*Avis : Pour plus de détails sur les produits sous licence de Mölnlycke, y compris les indications et les précautions d'emploi, veuillez vous référer au site [www.molnlycke.ca](http://www.molnlycke.ca)

### Références:

1. Quinn KJ (1987), Burns 13:33-40; Ahn ST et al (1991), Arch Surg 126:499-504; Dockery GL et al (1994), J Foot Ankle Surg 33:110-19; Katz BE (1995) Cutis 56:65-7; Carney SA et al (1994) Burns 20:163-7.

2. J.I Colum Maján, JoWC, Vol. 15, No 5 [5], 2006

Mölnlycke  
1-800-494-5134  
[www.molnlycke.ca](http://www.molnlycke.ca)

Mölnlycke Health Care AB, C.P. 13080, SE-402 52 Göteborg, Suède. Téléphone +46317223000.  
Les noms et logos respectifs de Mölnlycke Health Care, Mepiform®, et Safetac® sont déposés partout dans le monde à une ou plusieurs des compagnies Mölnlycke Health Care.  
© 2019 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés.

## Indications\*

Mepiform® est conçu pour le traitement des cicatrices hypertrophiques récentes ou anciennes, et pour les chéloïdes. Il peut également être utilisé en traitement prophylactique sur plaies fermées en prévention des cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes.

## Précautions\*

- En cas de macération ou de réaction cutanée, retirer le pansement jusqu'à disparition des symptômes. Reprendre ensuite le traitement en augmentant graduellement la durée de la thérapie.
- Si les symptômes persistent, arrêtez le traitement et consultez votre médecin.
- Stérilité et stockage: La stérilité est garantie sauf en cas de détérioration du sachet intérieur ou ouverture antérieure à l'utilisation. Ne pas restériliser.



  
**Mölnlycke®**

CFWC00721905