


Mölnlycke® Pulsed Lavage

Des solutions d'orthopédie personnalisées



Modèle avec batterie intégrée

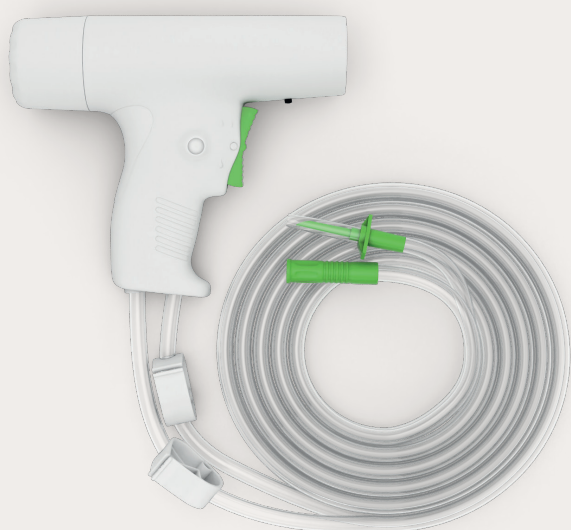

Modèle avec alimentation externe

Mölnlycke Pulsed Lavage ne contient pas de DEHP

Notre Mölnlycke® Pulsed Lavage, un système à usage unique, permet de nettoyer en profondeur le lit osseux et de retirer les débris durant une intervention primaire de prothèse, d'améliorer la pénétration du ciment dans l'os spongieux pour une meilleure fixation de l'implant et réduire ainsi le taux de révision de la prothèse. Il est également efficace dans le débridement des plaies pour retirer efficacement les tissus nécrotiques, contaminants et bactéries.

Disponible en deux modèles

- Système avec alimentation externe : un modèle respectueux de l'environnement qui ne nécessite pas de piles alcalines. Poignée à usage unique et adaptateur réutilisable.
- Système avec batterie intégrée : un modèle flexible et mobile équipé d'un bloc-piles intégré dans la poignée, pour un retrait aussi rapide qu'aisé.

Solution tout-en-un : pas de coûts cachés

- Poignée ergonomique et confortable
- Embout court avec jet conique et protection anti-claboussure
- Embout long pour canal fémoral
- Fonction d'aspiration et d'irrigation intégrée
- Brosse de nettoyage pour évacuer une éventuelle obstruction de l'embout fémoral

Emballage individuel ou dans des trousse composites ProcedurePak®

- Ajoutez un Pulsed Lavage à vos trousse sur mesure, spécifiques à chaque type d'intervention, pour gagner en efficacité
- Également disponible en emballage individuel stérile

Embout de révision avec filtre

- Pour les arthroplasties de révision de la hanche, un embout spécial permet de gérer les particules d'os et de ciment. Disponible sous emballage individuel stérile.

Mölnlycke® Pulsed Lavage – Modèle avec alimentation externe

Emballage individuel stérile

Réf.	Description
9750000	Système Pulsed Lavage, alimentation externe
9752000	Alimentation externe (AC100~240V)
9751000	Embout canalaire coaxial avec brosse
9751001	Embout conique
9751002	Embout canalaire coaxial
9751003	Embout de révision hanche

Disponible dans ProcedurePak®

Réf.	Description
2322130-00	Système Pulsed Lavage, alimentation externe
2320481-00	Embout canalaire coaxial avec brosse



Modèle avec alimentation externe



Adaptateur secteur




Embout canalaire coaxial avec brosse



Embout de révision hanche



Embout conique

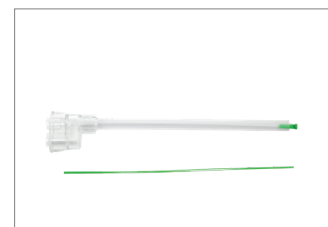

Embout canalaire coaxial


Mölnlycke® Pulsed Lavage – Modèle avec batterie intégrée

Emballage individuel stérile


Réf.	Description
9750003	Système Pulsed Lavage, batterie intégrée
9751004	Embout canalaire coaxial avec brosse
9751005	Embout conique
9751006	Embout canalaire coaxial
9751007	Embout de révision hanche

Disponible dans ProcedurePak®


Réf.	Description
2324050-00	Système Pulsed Lavage, batterie intégrée
2325431-00	Embout canalaire coaxial avec brosse

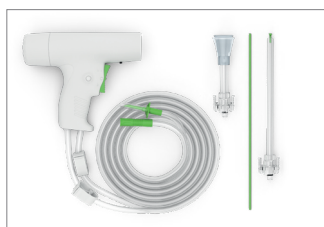


Modèle avec batterie intégrée

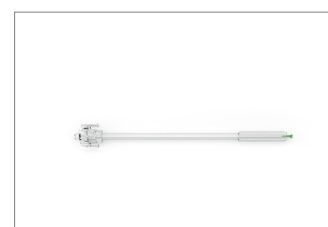


Embout canalaire coaxial avec brosse

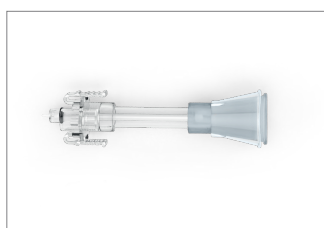

Embout conique

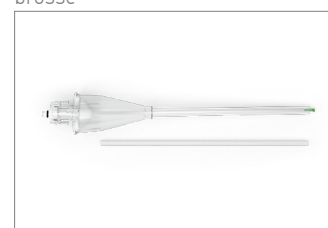

Embout de révision hanche

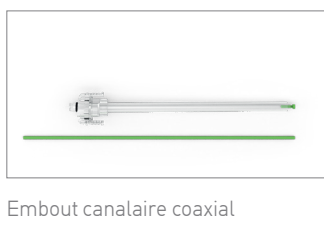

Embout canalaire coaxial

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, 2600 Berchem, Belgique. Tél. 03 286 89 50.

Le nom, le logo et la marque de Mölnlycke sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.
© 2022 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés.